

人凝血因子VIII(FVIII)ELISA 试剂盒

| | | | |
|-----|---------------------------------|-------|------------------------|
| 货号: | PY2014Hu-T | 检测范围: | 93.75mIU/mL-3000mIU/mL |
| 种属: | 人 | 保存温度: | 2-8°C |
| 规格: | 96T/48T | 有效期: | 6个月 |
| 用途: | 用于体外定量检测细胞、血清、血浆以及其他样本中的人FVIII。 | | |

※ 实验原理

本试剂盒采用双抗体夹心法 ELISA 技术：将捕获抗体包被于酶标板上，捕获样品及标准品中的待测物 FVIII，洗涤后，再加入生物素标记的检测抗体进行孵育后清洗，形成“捕获抗体-抗原-检测抗体”免疫复合物，随后加入链霉亲和素偶联的辣根过氧化物酶进行孵育，待孵育结束后清洗，过程中游离的成分均被洗去，接着加入 TMB 显色后，若样本中有待测物则显蓝色，加入终止液停止反应。用酶标仪在 450nm 处测 OD 值，颜色的深浅和样品中的待测物的含量呈正比，通过绘制标准曲线计算出样本中 FVIII 的浓度。

※ 试剂盒组成

| 中文名称 | 96T 配置 | 48T 配置 | 保存条件 |
|-----------|------------|------------|-------|
| 预包被酶标板 | 96 孔 | 48 孔 | 2-8°C |
| 标准品(冻干粉) | 2 支 | 1 支 | |
| 标准品复溶液 | 2 支 | 1 支 | |
| 标准品&样本稀释液 | 25mL × 1 瓶 | 25mL × 1 瓶 | |
| 生物素抗体 | 10mL × 1 瓶 | 10mL × 1 瓶 | |
| HRP 标记亲和素 | 10mL × 1 瓶 | 10mL × 1 瓶 | |
| TMB 显色液 | 10mL × 1 瓶 | 10mL × 1 瓶 | |
| 终止液 | 6mL × 1 瓶 | 6mL × 1 瓶 | |
| 20×浓缩洗涤液 | 25mL × 1 瓶 | 25mL × 1 瓶 | |
| 封板膜 | 4 张 | 4 张 | RT |
| 产品说明书 | 1 份 | 1 份 | |

需要而未提供的物品：

| 仪器设备 | 其它 |
|---------------------|--------------|
| 含 450nm 检测波长的酶标仪 | 吸水纸或者抽纸 |
| 各种量程移液器 | 蒸馏水或去离子水 |
| 可提供 37°C 环境的恒温箱或培养箱 | 各种规格吸头和 EP 管 |

※ **注意事项**

- 1. 本试剂盒仅供教研使用，不可作为体外诊断依据；**
- 预包被酶标板拆封后，未使用的板条请装入自封袋密封。为降低不同时间检测板内变异系数，间隔 48 小时内检测可 2-8°C 保存，如果间隔时间较长，请 -20°C 保存，并在下次检测时重新绘制标准曲线；
- 试剂盒提供的底物显色液使用前应保持无色或很浅颜色，直到添加到板中。如果收到的显色液显示很深蓝色，请联系售后技术支持；
- 此试剂盒提供的终止液为稀硫酸溶液，具有一定腐蚀性，应谨慎操作。如果不小心沾到皮肤上，请立即擦去，并用清水冲洗；**
- 请严格按照说明书进行操作；如有疑问，请一定与技术工程师确认后再进行操作，避免样本和时间上的浪费；**
- 不同批号试剂不建议混用，请勿使用其他品牌来源的试剂；
- 封板膜、吸水纸、加样过程中所用的 EP 管和吸头为一次性使用，严禁混用。

※ **样本处理及要求：**

- 1、血清：**将收集于血清分离管的全血标本在室温静置 30min 以上，不超过 2 小时，然后 2-8°C，2500-3500×g 离心 20min，仔细收集上清；
- 2、血浆：**应根据标本的要求选择 EDTA 或柠檬酸钠作为抗凝剂，样品采集后 30min 内在 2-8°C，3000×g 离心 15min，仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成，应再次离心；
- 3、尿液：**用无菌管收集，2-8°C，2500-3500×g 离心 10min，仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成，应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行；
- 4、细胞培养上清：**收集液体后于 2-8°C，2500-3500×g 离心 20min，除去杂质及细胞碎片，取上清检测。

- 5、**细胞裂解液**: 贴壁细胞用预冷的 PBS(0.01M,pH=7.4)轻轻清洗, 然后用胰蛋白酶消化, 2-8°C, 1000×g 离心 5min 后收集细胞; 悬浮细胞可直接离心收集。收集的细胞用冷的 PBS 洗涤 3 次。每 1×10^6 个细胞中加入 150-200 μ L PBS 重悬, 并通过反复冻融或超声使细胞破碎(推荐在 PBS 中加入蛋白酶抑制剂; 若含量很低可减少 PBS 的体积)。将提取液于 2-8°C, 10000×g 离心 10min, 取上清检测;
- 6、**组织样本**: 用预冷的 PBS(0.01M,pH=7.4)冲洗组织, 去除残留血液, 称重后将组织剪碎。将剪碎的组织与对应体积的 PBS(一般按 1:9 的重量体积比, 比如 1 g 的组织样品对应 9 mL 的 PBS, 具体体积可根据实验需要适当调整, 并做好记录。推荐在 PBS 中加入蛋白酶抑制剂)加入匀浆器中, 在冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞, 可以对匀浆液进行反复冻融或超声破碎。最后将匀浆液于 2- 8°C, 10000×g 离心 5-10min, 取上清检测;
- 7、**其它生物标本**: 2- 8°C, 2500-3500×g 离心 20min, 仔细收集上清。

样品外观: 样品应清澈透明, 悬浮物应离心去除。

样品保存: 样品收集后尽快检测。若不能及时检测, 请按一次使用量分装, 冻存于-20°C(1 个月内检测), 或-80°C(6 个月内检测), 避免反复冻融。


※ 试剂准备

使用前将所有试剂置于室温或 37°C 温箱平衡 30 分钟左右。

洗涤液配制：如果洗涤液 (20×) 有晶体析出，需在 37°C 下加热至晶体全部溶解。用蒸馏水 1:20 稀释 (例如：1mL 浓缩洗涤液加入 19mL 的蒸馏水)。

标准品重溶：用标准品复溶液重溶标准品，将一瓶标准品复溶液全部加入到一瓶标准品冻干粉中，上下颠倒数次混匀 (不可剧烈震荡产生大量气泡)，然后静置 10 分钟左右，重溶后得到品母液 STD，浓度为 6000mIU/mL。

标准品倍比稀释：准备 6 个试管，随后在 6 个试管中分别加入 500μL 的 1×标准品稀释液，在这 6 个单独的试管中将重溶后标准品母液 STD1 依次 2 倍倍比稀释，共得到 6 个浓度的标准品，依次为：3000mIU/mL、1500mIU/mL、750mIU/mL、375mIU/mL、187.5mIU/mL、93.75mIU/mL。具体稀释方法如图所示。以样本稀释液作为空白对照孔 (0mIU/mL)。

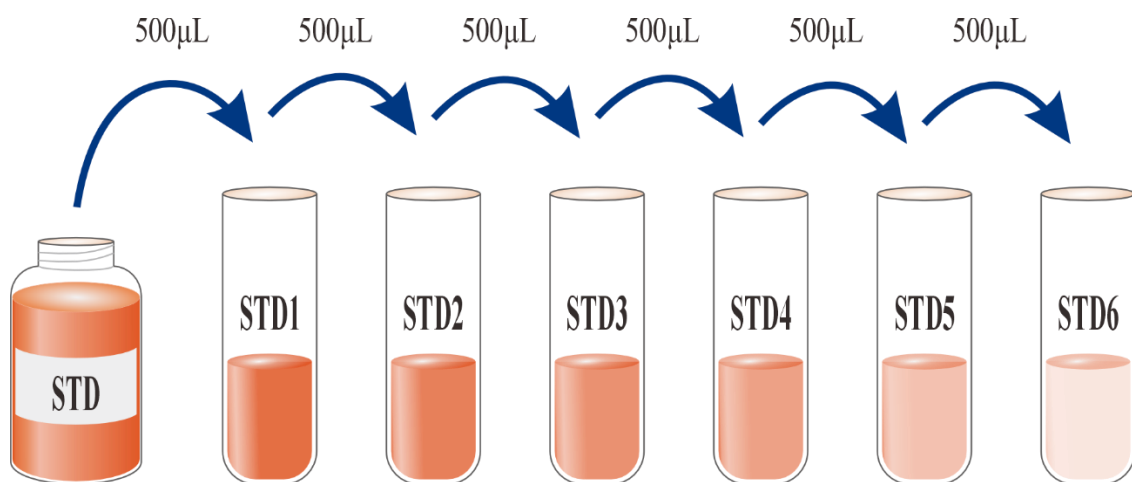

稀释后各管中标准品浓度如下(单位：mIU/mL)

| STD | STD1 | STD2 | STD3 | STD4 | STD5 | STD6 |
|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 6000 | 3000 | 1500 | 750 | 375 | 187.5 | 93.75 |

备注：如待测样本中 FVIII 浓度高于标准品最高值，请根据实际情况对样品进行适当稀释。

※ 实验步骤

所有标准品、样品建议复孔检测

1. **酶标板准备:** 确定实验所需要的孔数, 取下其它不使用的板条放入密封袋;
2. **样本孵育:** 首先在所有孔加入 50 μ L 样本稀释液, 然后在标准孔分别加入 50 μ L 不同浓度的标准品, 空白孔再加 50 μ L 样本稀释液, 样本孔加入 50 μ L 待测样品, 盖上封板膜, 37 $^{\circ}$ C 反应 1 h。孵育结束后, 每孔加入 200 μ L 1 \times 洗涤缓冲液, 轻轻晃动 30 秒, 甩干, 以这种方式清洗 3 次后拍干;
3. **抗体孵育:** 每孔加入 100 μ L 生物素化抗体, 盖上封板膜, 37 $^{\circ}$ C 反应 1h。孵育结束后, 重复步骤 2 中的清洗方式清洗 3 次后拍干;
4. **酶标试剂孵育:** 每孔加入 100 μ L HRP 标记亲和素, 盖上封板膜, 37 $^{\circ}$ C 避光反应 30min, 重复步骤 2 中的清洗方式清洗 4 次, **在新的吸水纸上拍干;**
5. **底物显色:** 每孔加入 100 μ L 底物显色液 TMB, 盖上封板膜, 37 $^{\circ}$ C 避光反应 15 分钟。注意观察显色过程, 如果加入显色液后 STD1 孔颜色较深, 待 STD6 孔出现轻微蓝色时即可提前终止显色;
6. **终止反应:** 待显色反应结束后, 每孔加入 50 μ L 终止液, 轻轻晃动酶标板混匀, 10 分钟内用酶标仪在 450nm 处测吸光值。

※ 结果的计算

计算标准品和样本复孔的平均 OD 值并减去空白孔的 OD 值作为校正值。以浓度为横坐标, OD 值为纵坐标, 在坐标纸上绘出四参数逻辑函数的标准曲线(作图时去掉空白组的值)。或者使用能够生成四参数逻辑 (4-P) 曲线拟合的计算机软件来创建标准曲线。若样品 OD 值高于标准曲线上限, 应适当稀释后重测并在计算样本浓度时乘以相应的稀释倍数。

※ 示例数据

以下数据和曲线仅供参考，实验者需根据自己的实验数据建立标准曲线。

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 标准品浓度 (mIU/mL) | 3000 | 1500 | 750 | 375 | 187.5 | 93.75 | 0 |
| OD 值 | 2.709 | 1.535 | 0.793 | 0.424 | 0.229 | 0.133 | 0.04 |
| 校正 OD 值 | 2.669 | 1.495 | 0.753 | 0.384 | 0.189 | 0.093 | 0 |



本图所示标准曲线仅供示例，结果计算应以同次试验标准品所绘标准曲线为准计算样本结果。

精密度

板内，板间变异系数均<10%。

板内精密度：在同一块板上重复检测三个已知浓度的样品 20 次，计算浓度的变异系数 (CV)。

板间精密度：在三块板子上对三个已知浓度的样品分别进行 20 次重复检测，计算浓度的变异系数 (CV)。

| 样本 | 板内精密度 | | | 板间精密度 | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 数量 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 平均值 (mIU/mL) | 202.34 | 381.68 | 769.05 | 194.39 | 390.82 | 728.01 |
| 标准差 | 3.78 | 8.55 | 21.38 | 4.67 | 10.12 | 21.91 |
| 变异系数 (%) | 1.87 | 2.24 | 2.78 | 2.4 | 2.59 | 3.01 |

回收率

分别往不同样本中添加已知浓度的人 FVIII, 做回收实验, 得出回收率范围和平均回收率。

| 样本类型 | 范围 (%) | 平均回收率 (%) |
|------------|--------|-----------|
| 血清(n=8) | 90-102 | 96 |
| 血浆(n=8) | 95-101 | 96 |
| 细胞培养物(n=8) | 99-115 | 106 |

灵敏度

经样本测试, 本试剂盒的检测灵敏度为 23.43mIU/mL。

线性关系

将高浓度人FVIII加入样本中，在标准曲线范围内分别稀释2倍，4倍，8倍，16倍做回收实验，得出回收率及平均回收率。

| | | 血清 (n=4) | 细胞培养物(n=4) |
|-------|-----------|----------|------------|
| 1: 2 | 回收率范围 (%) | 95-110 | 95-108 |
| | 平均回收率 (%) | 98 | 97 |
| 1: 4 | 回收率范围 (%) | 98-115 | 97-110 |
| | 平均回收率 (%) | 101 | 108 |
| 1: 8 | 回收率范围 (%) | 101-119 | 101-114 |
| | 平均回收率 (%) | 106 | 112 |
| 1: 16 | 回收率范围 (%) | 109-121 | 104-121 |
| | 平均回收率 (%) | 113 | 118 |

特异性

该试剂盒测定可识别重组人 FVIII。

其他相关蛋白在稀释缓冲液中制备为 50ng/mL，并测定交叉反应性。没有观察到明显的交叉反应。